

KaVo Primus™ 1058 Life

Ti puoi fidare.





Affidabile, giorno dopo giorno

Primus 1058 Life è stato progettato ponendo una grossa attenzione sull'affidabilità funzionale e sul rapporto costo-benefici, con un occhio al presente e uno al futuro. Scopri l'eccellente convenienza economica e unisciti alle migliaia di dentisti di tutto il mondo che, a proposito di Primus 1058, riferiscono che "ha una marcia in più".

Gli aspetti principali a colpo d'occhio:

Poltrona paziente

1. Poltrona dal design più razionale in un moderno colore bianco dentale
2. Carico massimo fino a 185 kg
3. Movimento Trendelenburg integrato per il comfort del paziente
4. Estensione minima/massima delle posizioni
5. Comfort ottimizzato grazie alla forma del soffice cuscino, imbottitura morbida opzionale RELAXline

Elementi dentista e assistente

6. Elemento dentista dal design moderno
7. Funzionamento semplice con più tasti di selezione diretta
8. Elemento assistente con tastierino di comando più chiaro e intuitivo

Comunicazione con il paziente

9. Telecamera intraorale KaVo ERGOcam One e KaVo DIAGNOcam
10. Nuovi schermi KaVo ad alta risoluzione, da 19" e 22"
11. Il nuovo software di sistema CONEXIO coniuga gestione del paziente, archivio radiografico 2D e immagini intraorali dal vivo, in una singola unità operativa.

** Prodotto non illustrato nell'immagine*







Versione SPRIDO

Migliori lunghezze di estensione e una guida igienica.
I manipoli ben bilanciati sono sempre assolutamente maneggevoli.



Versione Cart

Una maggiore mobilità combinata con un
funzionamento semplice. Il carrello può
essere allontanato, secondo necessità.

Elemento dentista semplice da mettere in funzione: una semplicità raffinata

Non importa se il trattamento viene eseguito in piedi o da seduti, l'elemento dentista di Primus 1058 Life ti sostiene sempre con la sua sofisticata ergonomia. Consente di evitare torsioni o allungamenti. Tutto perfettamente a portata di mano per processi efficienti.

Versione con cordoni pendenti

Ancora più libertà di movimento per una tecnica di lavoro ergonomica in qualsiasi posizione di trattamento

MEMOSpeed consente di richiamare rapidamente e in maniera affidabile i parametri archiviati per ciascun manipolo



Semplice e fatto su misura per te

Configura l'elemento dentista in modo che si adatti perfettamente alle tue necessità. È possibile configurare cinque alloggiamenti per manipolo e apportare comunque modifiche in seguito. Ciò garantisce una certa flessibilità per il futuro.

Nessuna deviazione. Dritti al punto

Risparmia tempo grazie ai pulsanti a selezione diretta per le funzioni automatiche. Il tastierino e il display integrato rendono sempre tutto molto chiaro.

Un posto su cui stare comodi e rilassati.

I pazienti che stanno comodi sulla poltrona odontoiatrica si rilassano di più e si muovono meno, consentendo al dentista di concentrarsi completamente sul trattamento. Il nuovo rivestimento morbido RELAXline e la forma ergonomica del cuscino sono stati appositamente progettati per aiutare a raggiungere questo obiettivo.



Rivestimento morbido RELAXline

Il memory foam, estremamente morbido, circondato da un soffice tessuto in simil pelle, in colori eleganti e con cuciture a mano, consente ai pazienti di stare in una posizione rilassata, anche durante lunghe sessioni di trattamento.

Va bene per te. Va bene per i tuoi pazienti.

In base alle esigenze individuali, il rivestimento flessibile girevole e il poggiatesta a doppio snodo ti consentono di trovare la posizione giusta per un paziente perfettamente sdraiato e di lavorare efficacemente.



Schienale Progress: postura corretta durante il lavoro e accesso ottimale per il dentista.



Semplicemente comodo: il poggiatesta a doppio snodo può essere azionato con una sola mano ed è dotato di cuscino girevole per la testa.

Ideale per tutte le necessità

KaVo Primus 1058 Life può essere configurato in base alle proprie necessità personali e a quelle dello Studio. L'altezza della poltrona paziente, che può essere regolata in modo continuo tra 350 mm e 830 mm, garantisce condizioni ergonomiche ottimali, indipendentemente dal fatto che si esegua il trattamento da seduti o in piedi.



COMPACTchair

Consente ai pazienti con limitata mobilità di salire e scendere agevolmente dalla poltrona. KaVo COMPACTchair si piega al livello delle ginocchia e della schiena. Ciò permette anche di ottenere un ambiente più "intimo", consentendo di effettuare le consulenze con il paziente seduto per poi trattarlo da sdraiato.

I benefici della maggiore flessibilità.



Mantiene le mani libere per lavorare.

Meno si tocca, più si lavora in maniera igienica. Le funzioni del manipolo e della poltrona si controllano con un comando a pedale: un'efficace precauzione contro la contaminazione crociata. Aziona la pedaliera Primus 1058 Life orizzontalmente, anziché verticalmente, come con l'acceleratore. Alla lunga, ciò rilassa i muscoli della gambe e ti consente di lavorare in maniera completamente rilassata.

L'assistente ha tutto sotto controllo.

Agevola la collaborazione con l'assistente dello Studio. Il workflow sarà supportato nel miglior modo possibile dall'elemento assistente che può essere posizionato individualmente. La modalità operativa prevede l'uso di pulsanti di selezione diretta.



Cambiare lato è semplice.

I dentisti mancini e quelli che eseguono il trattamento da soli apprezzeranno l'elemento assistente, che può essere ruotato a destra/sinistra. Questa caratteristica viene esaltata dall'enorme libertà di movimento dell'ampia gamma di oscillazioni e dalla regolazione in altezza variabile.

Destra o sinistra? Va sempre bene!

Primus 1058 Life è disponibile come unità per destrimani e per mancini. Prova il massimo della flessibilità e la sicurezza dell'investimento con Primus 1058 Life. Sarà adatto in ogni caso.



Ergonomia e comfort in perfetta armonia: KaVo PHYSIO Evo

È particolarmente importante per i dentisti adottare una postura sana e confortevole in ogni situazione di trattamento. Nulla influenza la postura tanto quanto la seduta che si utilizza ogni giorno per il proprio lavoro. Ecco perché KaVo PHYSIO Evo ed Evo F sono fatti su misura per le esigenze e i processi lavorativi dei dentisti e dei loro assistenti.



L'ergonomia si cela nei dettagli

Grazie a funzioni di regolazione separate, la superficie del sedile e lo schienale possono essere regolati singolarmente in base alle esigenze anatomiche e al proprio stile di trattamento. I cuscini dello schienale e del sedile di KaVo PHYSIO Evo sono ergonomici. La parte centrale rialzata della seduta imbottita garantisce la stabilità e impedisce lo slittamento, anche in caso di movimenti rotatori rapidi e brevi. Il poggia-femore arrotondato offre grande libertà di movimento. Grazie allo schienale supportato dalla forza della molla, i muscoli della schiena, e in particolare la colonna lombare, sono supportati e sostenuti attivamente per tutto il tempo. In questo modo, la possibilità di lavorare senza interruzioni e una seduta il più comoda possibile diventano una certezza in ogni trattamento.



Concepito in maniera eccezionale

La seduta da trattamento KaVo PHYSIO Evo è stata premiata con un marchio di qualità dall'associazione tedesca "Campaign for Healthier Backs" (AGR). Una commissione di esperti indipendente e multidisciplinare basa questo premio su severi criteri di valutazione per quanto riguarda ergonomia e salute.



Apparecchiature per una maggiore efficienza quotidiana del tuo Studio

Apparecchiature con opzioni che consentono di ottenere ogni giorno vantaggi. L'ampia gamma dell'apparecchiatura Primus 1058 Life offre soluzioni su cui puoi fare totalmente affidamento.

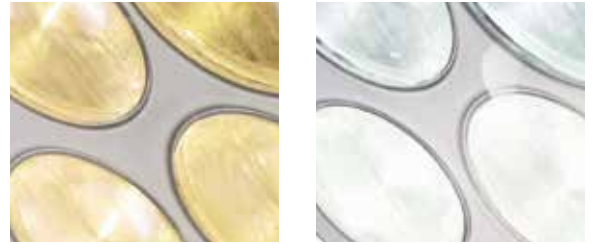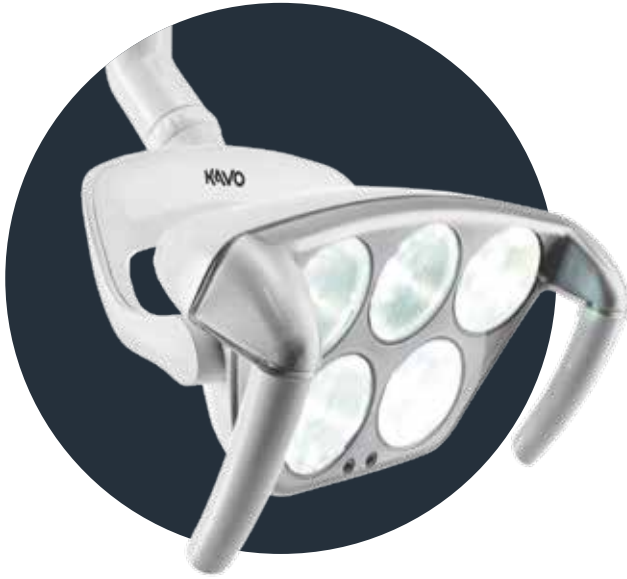

L'innovativa modalità COMPOsave filtra tutti i componenti blu della sorgente luminosa, rallentando così la polimerizzazione indesiderata dei materiali compositi.

Il tuo Studio nella luce migliore.

Affidati alla lampada a cinque stelle di KaVoLUX 540 LED. Una luce naturale bianca di altissima qualità che, allo stesso tempo, contribuisce in maniera significativa all'igiene dello Studio. La lampada può essere accesa e spenta e azionata senza contatto, anche in modalità COMPOsave™. Ha un alloggiamento sigillato, superfici lisce e impugnature rimovibili.



Lampada operatoria MAIA LED



Radiografie intraorali sempre nel range

In alternativa, installa KaVo FOCUS™ sul palo lampada con adattatore e, quindi, crea immagini radiografiche ottimamente regolate per le indicazioni radiologiche, direttamente sul riunito: con grande precisione, risparmio di tempo e direttamente accanto al paziente.

Le più alte prestazioni a tua disposizione

Prova cosa possono fare i motori. Intervalli di velocità da 100 a 40.000 giri/min, con trasmissione radio 1:1.



KaVo INTRA LUX KL 701 LED:

Design compatto, leggerezza.

Altamente affidabile, poche necessità di manutenzione.

KaVo INTRA LUX KL 703 LED:

Ancora più piccolo e leggero con una perfetta distribuzione del peso. Potenza infinita. Consente di lavorare senza affaticarsi.



Due ablatori per una straordinaria varietà del riunito

Con il manipolo a ultrasuoni PiezoLED, la detartasi diventa più rapida e più semplice. I sonotrodi in titanio con vibrazioni lineari garantiscono un'elevata efficacia del trattamento. Denti e gengive non vengono colpiti, anche nelle aree più sottili, poiché le emissioni luminose circolari garantiscono una visibilità ottimale, inoltre potrai lavorare senza affaticarti grazie al design ergonomico e leggero.

KaVo SONICflex è un dispositivo davvero completo grazie alle numerose capacità. Con oltre 50 punte da cambiare con un semplice gesto, diventerà presto uno dei tuoi strumenti più versatili e più usati. KaVo SONICflex è utilizzabile per operazioni di profilassi, endodonzia, parodontologia, trattamenti di carie minimamente invasivi, chirurgia o preparazione.

CONEXIO connette ciò che va insieme.



Consente di controllare comodamente la comunicazione con il paziente dall'elemento dentista e di aggiungere nuove immagini direttamente al file digitale del paziente. Primus 1058 Life si combina con CONEXIO per offrirti nuove opportunità.



Panoramica perfetta: stato del monitoraggio clinico

Ogni immagine viene assegnata a un dente del paziente durante l'esame; di conseguenza, è possibile definire uno stato di monitoraggio clinico da "sano" a "critico". La modalità di confronto fornisce l'opportunità di effettuare un controllo cronologico, anche durante la diagnosi, usando immagini più vecchie dei denti o anche immagini da fonti diverse.

UN
EFFICACE
WORKFLOW

Passa dalla modalità di trattamento al mondo delle immagini digitali e torna con un solo clic sull'elemento dentista. CONEXIO semplifica il workflow del dentista, senza bisogno di usare il mouse o la tastiera.




KaVo DIAGNOcam. Avanti anni luce rispetto alla carie.

I sensori intraorali e le apparecchiature a raggi X 2D o 3D spesso mostrano la carie solo dopo che questa ha raggiunto la dentina. KaVo DIAGNOcam è l'aggiunta perfetta al tradizionale rilevamento della carie e consente di rilevare carie interprossimali e oclusali molto prima e molto più facilmente. Esente da distorsioni dovute a depositi di placca o sovrapposizioni delle strutture, osserva la struttura del dente e la carie con una notevole chiarezza: senza attese né raggi X, e direttamente alla poltrona.

KaVo ERGOcam One: una piccola telecamera che diventa grande

Le immagini KaVo ERGOcam One consentono di illustrare ai pazienti la reale situazione dei denti in quanto offrono un'elevata profondità di campo e un'eccezionale riproduzione di colori.

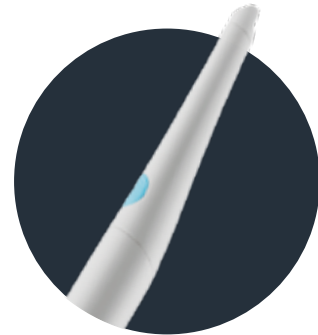

Mostralo ai pazienti.

La schermata colpisce grazie alla qualità delle immagini ad alta risoluzione, gli elevati valori di contrasto e la brillante riproduzione del colore.

KaVo Screen One

- Schermo piatto HD-True
- Rapporto di aspetto: 16:9
- Schermo diagonale: 19 pollici
- Due input digitali (microscopio e PC)

KaVo Screen HD

- Schermo piatto full HD-True
- Rapporto di aspetto: 16:9
- Diagonale schermo: 22 pollici
- Due input digitali (microscopio e PC)





Igiene moderna: semplice e sicura

Primus 1058 Life è molto semplice da pulire. I componenti principali quali il tappetino in silicone, il vassoio del manipolo, la staffa del braccetto oscillante e la sputacchiera si staccano facilmente ai fini della disinfezione. Tutte le superfici e le parti contaminate sono facili da pulire.



La degerminazione permanente con aggiunta di KaVo OXYGENAL 6 riduce la proliferazione di alghe e germi. Le superfici lisce, le fodere protettive rimovibili e i vassoi per manipolo rendono semplice la pulizia. Grazie alle maniglie igieniche, i filtri di aspirazione possono essere cambiati facilmente e in maniera sicura.



Protezione delle linee da acqua contaminata.

Il gruppo dell'acqua con ingresso libero soddisfa gli elevati benchmark dello standard DVGW. Inoltre, la degerminazione continua con KaVo OXYGENAL 6 garantisce la riduzione permanente di batteri e germi. Grazie all'intensivo programma di riduzione dei germi, proteggerai i pazienti dai microrganismi che possono formarsi a un aumentato livello di infestazione, in periodi di prolungata stagnazione, come avviene nel corso dei fine-settimana o delle vacanze.

Riduci al minimo i rischi con il programma di lavaggio RKI.

Soddisfa i requisiti delle attuali linee guida RKI. Primus 1058 Life esegue un lavaggio standardizzato e automatico degli strumenti all'inizio della giornata lavorativa e dopo aver lavorato su ciascun paziente.

La forza pulente dell'acqua: HYDROclean

Avvia il programma automatico HYDROclean per la pulizia dei sistemi di separazione dell'amalgama, di aspirazione e di drenaggio del riunito con acqua.

Maggiore protezione grazie un più lieve effetto di aspirazione retroattivo

L'arresto automatico retroattivo dell'aspirazione di motori e strumenti KaVo impedisce che l'acqua contaminata venga aspirata nel riunito. Di conseguenza, il sistema di approvvigionamento idrico è protetto in modo affidabile.



Risparmia tempo grazie al gel KaVo DEKASEPTOL miscelato e pronto all'uso. Il gel bagna il cordone e i sistemi di aspirazione e aderisce alle regioni contaminate, anziché passare semplicemente attraverso.



Qualità che paga

Comprovato nel tempo, con oltre 45.000 unità vendute. Primus 1058 è sempre stato progettato per il funzionamento continuo. I componenti di alta qualità, che si abbinano perfettamente, vengono elaborati con elevata precisione a questo scopo. L'intera unità, dalla vite più piccola a tutto il corpo dello strumento, è progettata per un carico e una durata massimi. I nostri prodotti sono sottoposti a test completi per garantire che possano resistere a carichi di lavoro giornalieri. Per evitare guasti e altre complicazioni costose e per mantenere la tua fiducia anche in futuro.


Colori metallizzati



Blu notte
metallizzato



Blu fumo
metallizzato

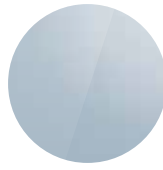


Blu argento
metallizzato



Argento
metallizzato



Frutti di bosco
metallizzato

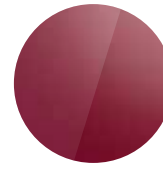

Rosso porpora
metallizzato



Marrone ciocc.
metallizzato


Colori base



Arancione



Mela verde

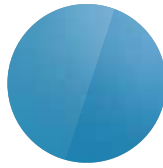


Blu oceano




Bianco dentale

*I colori mostrati
potrebbero non essere precisi per le
limitazioni di riproduzione
(ordinare la tabella colori KaVo)*


Colori del rivestimento

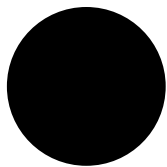


Nero

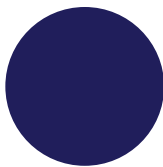


Blu notte

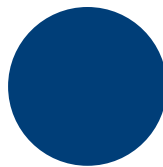

Blu fumo

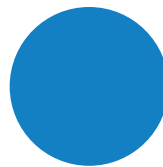


Blu oceano

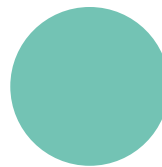


Menta




Greenery

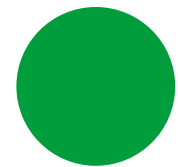


Verde smeraldo

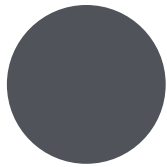


Antracite

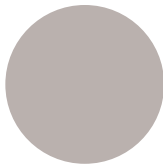


Grigio perla

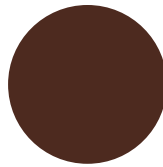

Marrone cioc.

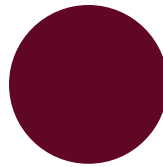


Rosso porpora

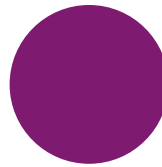

Frutti rossi




Rosso rubino

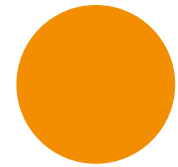

Arancione


Rivestimento morbido RELAXline

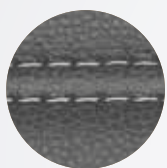

Grafite



Cashmere

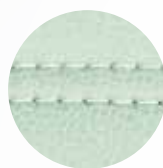

Agave

Greenery Edition



Greenery

Opzioni accessori

	TM	S	Cart		TM	S	Carrello
Poltrona paziente							
Standard	●	●	●		●	●	●
COMPACTchair	○	○	○		●	●	●
Rivestimento morbido	●	●	●		○	○	○
Rivestimento RELAXline Soft	○	○	○		○	○	○
Schienale							
Progress	●	●	●		○	○	○
Comfort ²	○	○	○		○	○	○
Poggiatesta							
Poggiatesta	○	○	○		○	○	○
Doppio snodo con rotellina	●	●	●		○	○	○
Doppio snodo con pulsante	○	○	○		○	○	○
Bracciolo							
Destro	○	○	○		x	x	x
Sinistro	○	○	○		x	x	x
Elemento dentista							
Cordone della turbina	○	○	○		●	●	●
KL-Motor 701	○	○	○		●	●	●
KL-Motor 703 LED™	○	○	○		○	○	○
Manipolo a tripla funzione	○	○	○		●	●	●
Manipolo multi-funzione	○	○	○		○	○	○
COMFORTdrive™	○	○	○		○	○	○
SMARTdrive™	●	●	●		○	○	○
Ablatore a ultrasuoni PiezoLED™	○	○	○		○	○	○
Ablatore sonico SONICflex™	○	○	○		○	○	○
Display MemoSPEED: memorizzazione					○	○	○
n° giri secondo indicazione	○	○	○		○	○	○
Visualizzatore radiografia panoramica ⁴	○	○	○		○	○	○
(montato sul montante)							
Visualizzatore radiografia panoramica	-	-	○ ³		x	x	x
Porta-vassoio per vassoio US	x	x	○		x	x	x
Porta-vassoio per vassoio standard singolo	x	-	x		x	x	x
Porta-vassoio per due vassoi standard	○	○	-		x	x	x
Riscaldamento spray per strumenti	○	○	○				
Tasto funzione campanello	○	○	○				
Comunicazione con il paziente							
KaVo Screen One	○	○	○				
KaVo Screen HD	○	○	○				
CONEXIO™	○	○	○				
Telecamera intraorale KaVo ERGOcam™ One	○	○	○				
KaVo DIAGNOcam™	○	○	○				
Elemento assistente							
Unità di aspirazione spray					○	○	○
Aspirasaliva					●	●	●
Secondo aspirasaliva					○	○	○
Manipolo a tripla funzione					○	○	○
Manipolo multi-funzione					○	○	○
Lampada polimerizzante Satelec MiniLED					○	○	○
Supporto per porta-vassoio					○	○	○
Elemento assistente rotante a destra/sinistra e altezza regolabile					●	●	●
Elemento assistente rotante a destra/sinistra e altezza regolabile					○	○	○
Guida del tubo di aspirazione					○	○	○
Kit supporto selettivo					○	○	○
Corpo unità							
Sputacchiera in porcellana					x	x	x
Sputacchiera in vetro					x	x	x
VACUstopp					●	●	●
Degerminazione permanente ⁵					●	●	●
Degerminazione intensiva ⁶					○	○	○
HYDROclean					●	●	●
Boiler acqua calda					○	○	○
Sistema di alimentazione							
Gruppo dell'acqua DVGW					x	x	x
Gruppo dell'acqua compatto					x	x	x
Flacone dell'acqua DVGW					x	x	x
Regolatore bassa pressione					○	○	○
Collegamento a dispositivo esterno					○	○	○
Sistema di smaltimento							
Aspirazione esterna					x	x	x
Separatore per amalgama SeDÜRR					x	x	x
Separatore automatico DÜRR					x	x	x
Kit raccogliore solidi					x	x	x
Altro							
KaVo PHYSIO Evo / Evo F					○	○	○
KaVo PHYSIO One					○	○	○
Lampada operatoria KaVoLUX™ 540 LED					○	○	○
Lampada operatoria MAIA LED					○	○	○
Barra di attacco lampada					○	○	○
Adattatore per barra di attacco lampada					○	○	○
Service box paziente					○	○	○
Tavoletta di servizio 1568					-	-	○
Set di base DEKASEPTOL gel					●	●	●

● Dotazione standard ○ Dotazione opzionale x Selezione obbligatoria - Non disponibile

1. Non disponibile per poltrone paziente COMPACTchair
2. Solo per poltrone paziente COMPACTchair
3. Non può essere collocato sotto un tavolo

4. Non adatto all'uso con strumenti multimediali
5. Solo con gruppo dell'acqua DVGW e flacone dell'acqua DVGW
6. Da usare solo con il gruppo dell'acqua DVGW