

Presentiamo CS Model+ v4

Nuove caratteristiche sono state aggiunte mentre altre sono state automatizzate. Abbiamo semplificato molte funzioni di uso quotidiano: il monitoraggio dell'evoluzione del trattamento, l'adattamento dei piani di trattamento e la visualizzazione delle acquisizioni di bite multiple. Grazie anche alle nuove opzioni di esportazione del modello virtuale, è facile constatare come CS Model+ v4 offra un flusso di lavoro completo, dall'inizio alla finalizzazione.

CARATTERISTICHE

VANTAGGI



1 Un modo migliore di monitorare l'evoluzione

La funzione di monitoraggio del paziente permette di sovrapporre due set di dati 3D, ad esempio scansioni acquisite in momenti differenti o setup di trattamento differenti, per il monitoraggio dei cambiamenti del trattamento nel tempo, quali l'evoluzione, la recidiva, il bruxismo o l'erosione.

Puoi visualizzare le differenze cliniche e poi utilizzare la mappa delle distanze per misurare i cambiamenti. I report automatizzati ti permettono di comunicare, inviare ai colleghi o semplicemente archiviare le informazioni del paziente.

Ti permette di visualizzare rapidamente l'evoluzione della situazione dentale del paziente.



2 Gestione efficiente dei casi di recidiva

Se un paziente si presenta in studio con una recidiva, non è necessario riprogettare interamente un setup completo di trattamento. Invece, puoi avvalerti della scansione di fine trattamento del paziente, e CS Model+ riprogetterà i passaggi in base al precedente risultato clinico del paziente.


Risparmi tempo, avvalendoti dei set di dati finali scansionati dei pazienti, quando pianifichi i trattamenti per le recidive.



3 Definizione più accurata delle discrepanze della linea mediana

In alcuni casi, la discrepanza della linea mediana è così importante da trovarsi al di fuori dei parametri di normalità. Il cursore scorrevole di allineamento della linea mediana permette di espandere la linea mediana al di là della posizione standard.

Le capacità avanzate di posizionamento della linea mediana sono utili per i casi chirurgici complessi, nei quali la linea mediana va al di là della norma.

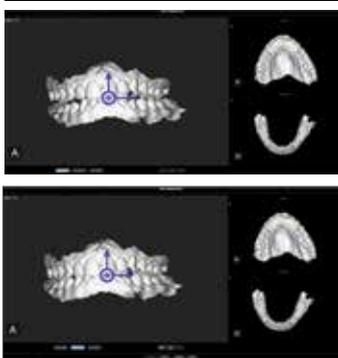

4 Gestione e visualizzazione di acquisizioni di bite multiple

Dopo la registrazione di bite multipli durante il processo di acquisizione della scansione intraorale, ora puoi importare i bite in CS Model+ e commutare tra le varie visualizzazioni.


Ti permette di visualizzare acquisizioni di bite differenti direttamente nel software CS Model+.



5 Automattizzazione del flusso di lavoro basata sull'intelligenza artificiale

Grazie all'uso dell'intelligenza artificiale, non occorre tempo aggiuntivo per selezionare e individuare i denti non rilevati. Sono stati ottenuti miglioramenti significativi nel rilevamento dei denti; la percentuale di successo è cresciuta da oltre l'80% a oltre il 90%.

Ti permette di adattare i casi rapidamente e agevolmente, così anche i casi più difficili richiedono meno di un minuto.

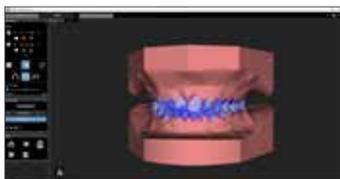

6 Un modo più semplice di pianificare il trattamento

Lo strumento di sovrapposizione permette di visualizzare il set di dati dei pazienti insieme a un setup di trattamento al fine di apportare modifiche alla pianificazione. Se necessario, CS Model+ permette di effettuare una duplicazione per creare setup multipli di trattamento per simularne varie opzioni.

La duplicazione del setup ti permette di ridurre il numero di passaggi nella pianificazione di opzioni multiple di trattamento sullo stesso paziente.



7 Visualizzi i modelli nel modo che desideri

Senza dover far scorrere il cursore della trasparenza per regolare manualmente la rappresentazione, puoi visualizzare la base, la gengiva o la dentizione secondo le tue preferenze, tutto con un solo clic.


Puoi evidenziare rapidamente una situazione dentale specifica mantenendo allo stesso tempo un notevole controllo sui tuoi modelli digitali.



8 Potenziamento delle capacità di esportazione 3D

Le opzioni di esportazione 3D in CS Model+ sono state migliorate e ora includono base ABO, base ridotta, nessuna base e l'acquisizione attuale. Ora puoi scegliere opzioni di esportazione per la stampa che includono un modello full o hollow (cavo) e puoi anche determinare lo spessore del modello come desideri. Inoltre, puoi anche aggiungere al modello il nome del paziente. Quando si usano stampanti stereolitografiche (SLA), CS Model+ propone automaticamente il supporto per la stampa per l'orientamento verticale, riducendo significativamente il tempo necessario.

Ti permette di stabilire una preferenza di orientamento di default, memorizzando le tue preferenze.

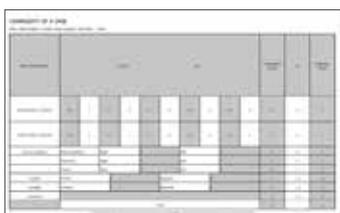

9 Nuovo punteggio Peer Assessment Rating (PAR)

Usando la funzione di monitoraggio del paziente, ora il punteggio PAR viene calcolato automaticamente, facilitando per te il confronto della situazione dentale del paziente all'inizio e alla fine del trattamento.

Ti fornisce i dettagli del punteggio PAR automatico e ti permette di condividere il report come necessario.

È possibile esportare i dettagli del punteggio PAR come singolo report in formato PDF o in un file Microsoft Excel.



10 Progettato in base al vostro input

Ascoltare i nostri clienti, e rispondere alle loro esigenze è un aspetto essenziale, pertanto abbiamo integrato in questa versione i miglioramenti richiesti da dentisti, distributori e responsabili commerciali.

Migliora la tua esperienza di utente di CS Model+.

- Abbiamo migliorato alcuni aspetti della traduzione e la grafica nell'intero software, per affinare l'esperienza dell'utente.
- Ora puoi impostare la data nei report in base alle tue preferenze e scegliere tra la formattazione GG/MM/AA e MM/GG/AA.
- Abbiamo rinnovato le opzioni di impostazione per rendere più facile la comprensione rapida di quali parametri puoi usare per adattare e valutare i tuoi setup.
- Abbiamo reso più facile l'importazione dei set di dati scansionati 3D e il supporto di immagini quali le panoramiche e le cefalometriche.

Gli iscritti a CS Model+ CS Advantage riceveranno automaticamente un'e-mail con il link per scaricare CS Model+ v4. I clienti attualmente non iscritti a un piano CS Model+ CS Advantage, ma che desiderano un upgrade a CS Model+ v4, possono acquistare un upgrade software "one time" tramite un rivenditore Carestream Dental.